

**SEU CONSULTÓRIO MUITO MAIS SEGURO**

**21**  
SISTEMAS DE SEGURANÇA

Imagem ilustrativa.



**AUTOCLAVE 21L**

**A TECNOLOGIA EVOLUI VOCÊ TAMBÉM**

Projetada para entregar altíssimo desempenho em todos os seus procedimentos, só a Linha de Autoclaves Saevo integra tecnologia com design e:

- Sistema inteligente de controle de temperatura, pressão e altitude;
  - Cruza dados de temperatura e pressão para ter maior precisão
  - Dispositivos eletroeletrônicos e mecânicos que oferecem maior proteção
  - Ciclo de secagem com porta entreaberta ou porta fechada
  - Bivolt (seleção automática)
  - Calibração de altitude até 4.000m para controle de pressão mais preciso
- Garantia de segurança e saúde em seu mais alto nível.

ANVISA: 10069210079

**AUTOCLAVE 12L**



2 BANDEJAS




ANVISA: 10069210082

- 01 VÁLVULA ANTIVÁCUO** subpressão
- 02 VÁLVULA DE SEGURANÇA** sobrepressão
- 03 SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO**

- 04 ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE**  
Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão.
- 05 3 BANDEJAS**
- 06 TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL**  
Permite uma longa durabilidade e resistência.
- 07 MANÔMETRO**  
Permite o monitoramento adequado de temperatura e pressão de trabalho durante todo o ciclo de esterilização.
- 08 PAINEL DE COMANDOS**  
Painel de comandos localizado na lateral do equipamento. Protegendo das mudanças de temperatura.

ANVISA - Seladora e Destiladora: Produto não correlato.  
MARÇO - 2024 | COD. 5100000182

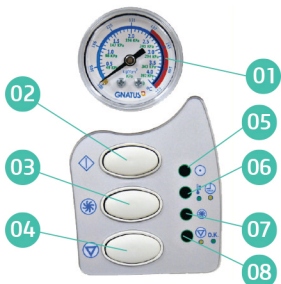

**PAINEL DE COMANDOS**

- 01 | Indicação de pressão e temperatura
- 02 | Início do ciclo de esterilização
- 03 | Extra secagem
- 04 | Anula/interrompe o ciclo de esterilização
- 05 | Equipamento ligado
- 06 | Indicação do processo de aquecimento/esterilização
- 07 | Indicação do processo de secagem
- 08 | Interrupção de ciclo

**SOLICITE ORÇAMENTO**



BIOSSEGURANÇA