

MICROMOTOR ELÉTRICO E CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR

- MAIS TECNOLOGIA
- MAIS PRECISÃO
- MAIS SILÊNCIO

PRECISAMENTE
CONFORTÁVEL

Imagem ilustrativa.

**SEU PACIENTE
PEDE SILÊNCIO
VOCÊ PEDE
PRECISÃO**

Sistema de iluminação **LED+** que difunde uma luz natural e branca, semelhante a luz do dia, superior aos sistemas de iluminação LED tradicionais.

MICROMOTOR ELÉTRICO

O **Micromotor Elétrico** oferece ao profissional precisão, qualidade e produtividade, agregando valor ao serviço e satisfação ao cliente.

A tecnologia do **Micromotor Elétrico** traz um torque elevado, controle preciso da velocidade de rotação e baixo ruído.



MICROMOTOR ELÉTRICO

PRECISÃO EM CADA DETALHE

Com uma tecnologia altamente avançada o Micromotor Elétrico possui um controle de potência de forma linear e sem vibração. Sinta a mudança em suas mãos ao realizar o refinamento de seus preparos bucais e a precisão nos detalhes que esse produto oferece.

O Micromotor Elétrico é um micromotor brushless, esterilizável sem necessitar de qualquer manutenção, apresentando lubrificação vitalícia. Dotado de um sistema eletrônico microcontrolado, proporcionando uma utilização e funcionamento otimizados para a sua prática clínica

ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO

Sistema de iluminação LED+ que difunde uma luz natural e branca, semelhante a luz do dia, superior aos sistemas de iluminação LED tradicionais, com potência de 25.000 lux.

Velocidade Máxima: 40.000 rpm
Torque Máximo: 3.5 N.cm
Sistema de Irrigação: Interno
Sistema de Iluminação: LED+
Tipo de Conexão: ISO 3964
Acoplamento Curto (INTRA)
Peso: 57 gramas



MAIS SILÊNCIO NO CONSULTÓRIO

O uso de Micromotor Elétrico em substituição às tradicionais turbinas de alta rotação reduz de maneira quase que completa o nível de ruído durante a execução dos procedimentos odontológicos, trazendo conforto não só para o paciente, mas também para o dentista.

MICROMOTOR ELÉTRICO

Agora, com o Micromotor Elétrico, você pode de maneira fácil e rápida acoplar o terminal borden do seu equipo e também utilizá-lo através do pedal de comandos do seu consultório.

O seu Micromotor Elétrico está disponível em duas versões:

MICRO MOTOR ELÉTRICO PORTÁTIL (BANCADA)




KIT PARA EQUIPO - MICROMOTOR ELÉTRICO (MME)



O Micromotor Elétrico pode ser adquirido como Kit e instalado em qualquer equipo das Cadeiras Odontológicas Saevo*.

*Exceto na S200 Smart

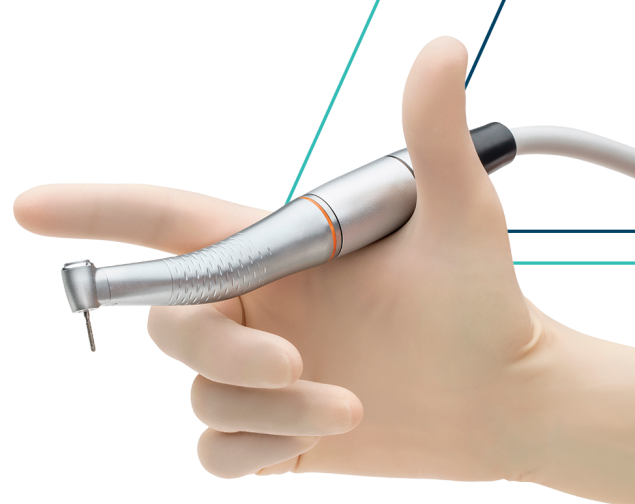

CONTRA-ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5 LED+

Com transmissão de Velocidade de 1:5, o Contra-Ângulo multiplicador opera com velocidades de até 200.000 RPM com um torque significativamente superior a uma alta rotação tradicional, garantindo precisão, redução de tempo, qualidade de trabalho, conforto e satisfação para o dentista e para o paciente.

SPRAY QUÁDRUPLO

Direcionado à ponta da broca, o sistema de spray interno duplo, refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho. A refrigeração previne a ocorrência de superaquecimento em preparos dentais que poderiam levar a danos à estrutura dental sadia.

LED+

Transmissão luz através de LED localizado no micromotor ao contra-ângulo através de fibras de vidro. Potência de luz em 25.000 lux.

CABEÇA REDUZIDA

O Contra-Ângulo é dotado de uma cabeça pequena com o ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais provendo maior visualização para o profissional.

NOVEMBRO - 2022 | COD. 51000000194

ANVISA:

Micro Motor Elétrico Portátil: 10101139032
Contra Angulo WH WG-99 LT: 80047309158

Kit MME é um acessório de uso exclusivo dos Equipos Odontológicos - 10069210075

SOLICITE ORÇAMENTO



MICROMOTOR ELÉTRICO E CONTRA-ÂNGULO