

Sillón Dental
NUEVA LÍNEA
S500

SAEVO

TECNOLOGÍA
EN SINTONÍA
CON TU
TALENTO

S500 es un consultorio dental diseñado para sorprender al odontólogo con su avanzada tecnología y diseño.



CONOCE A LA LÍNEA S500

- 1 Reposacabezas con movimiento biarticulado
- 2 Brazo de apoyo plegable para el paciente
- 3 Tapizado con 15 opciones de colores
- 4 Pedal de comandos Joystick con Chip Blower
- 5 Base con ribete antideslizante
- 6 No requiere fijación al piso
- 7 Kit PAD/Negatoscopio incorporado
- 8 Permite hasta 6 terminales
- 9 Micromotor eléctrico (MME)
- 10 Manómetro para visualizar la presión del aire y alimentación del equipo
- 11 Bandeja de apoyo para instrumentos
- 12 Varillas retráctiles con bloqueo (en la Unidad Dental H)
- 13 Unidad Dental con brazo neumático
- 14 Sistema Flush
- 15 Unidad de agua con escupidera extraíble de porcelana abatible a 180°, sensor de proximidad y porta vasos
- 16 Brazo asistente con PAD
- 17 Reflector Sirius 3x2 LEDs con sensor de proximidad



Imagen ilustrativa

COLORES SAEVO

Tapizados que inspiran tu rutina de trabajo.

PVC o Viscoelástico




Cuero



ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 3x2 LEDs

- Tecnología de iluminación LED: eficiente en términos energéticos y duradera.
- Sensor de proximidad y control de la intensidad luminosa.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador con manejo ergonómico.
- Cabeza giratoria con material duradero.
- Asas de bucle bilateral autoclavables para aislamiento.
- Protector frontal removible para la protección del sistema óptico.
- Sistema óptico con 5 LEDs: 3 LEDs blancos + 2 LEDs amarillos
- Cuatro intensidades de luz - Luz Blanca: 15.000, 25.000 y 35.000 LUX y Luz Amarilla: 6.500 LUX
- Permite el uso de la luz amarilla durante procedimientos clínicos, aumentando el tiempo de manipulación al inhibir la polimerización temprana de resinas compuestas y otros materiales fotoactivados.

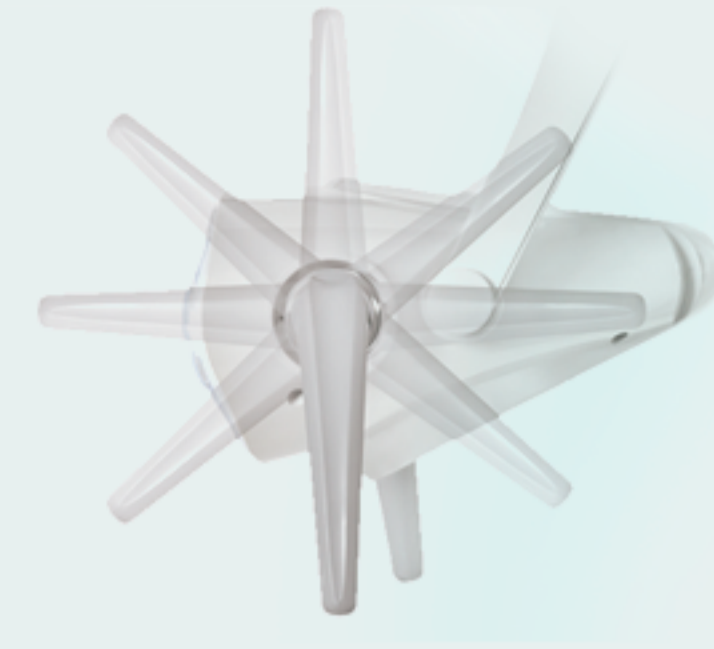

Micromotor Electrico

- Transmisión de velocidad: 1:1
- Velocidad máxima: 40.000 rpm
- Par máximo: 3.5 N.cm
- Sistema de irrigación: Interno
- Sistema de iluminación: LED+
- Tipo de conexión: Acoplamiento corto ISO 3964 (INTRA)
- Peso: 57 gramos



Control PAD con negatoscopio



Brazo Asistente con PAD

(Disponible solo en las versiones S502 y S502 H)

COMPARA LAS VERSIONES



	S501	S501 H	S502	S502 H
Sillón	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air	Hasteflex	Air	Hasteflex
Accesorios de la Unidad Dental	Bandeja Doble Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Doble Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Micromotor Electrico	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Micromotor Electrico
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple
Reflector	Sirius 3x2 LEDs	Sirius 3x2 LEDs	Sirius 3x2 LEDs	Sirius 3x2 LEDs

Los Sillones Dentales S501, S501 H, S502 y S502 H están compuestos por:
Sillón S500 - Anvisa: 10069210062 | Unidad Dental Syncrus G8 FE; Syncrus G8 HE - Anvisa: 10069210075
Unidad de agua Syncrus G4A - Anvisa: 10069210063 | Reflector Sirius G8 Sensor 5 (3x2) Leds - Anvisa: 10069210069

Abril - 2024 | COD. 51000000217



SOLICITA COTIZACIÓN

